

MMO8000

Ultraniskie elektryczne łóżko bariatryczne



MMO[®]
M E D I C A L

www.mmomedical.fr

ERGONOMIA

Łóżko **MMO8000** zostało zaprojektowane w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb pacjentów bariatrycznych.

Pielęgnacja pacjenta bariatrycznego wymaga łóżka szpitalnego, które pozwoli zapewnić optymalne i ergonomiczne środowisko pracy dla opiekunów.

Funkcjonalność łóżka **MMO8000** pozwala ułatwić codzienną opiekę nad pacjentem:

- Regulacja wysokości łóżka od 21 cm do 83 cm, pozwalająca zmniejszyć ryzyko upadków.
- Regulacja kąta nachylenia łóżka, dająca unikalne możliwości łatwego i bezpiecznego pozycjonowania.
- Zdemontowany dolny i górny szczyt łóżka dla potrzeb ułatwienia pielęgnacji i leczenia.
- Kompatybilność z akcesoriami dla pacjenta, ułatwiającymi podnoszenie się i mobilizację.

KOMFORT

Łóżko **MMO8000**, dzięki automatycznej funkcji krzesła wspomagającą pracę układu oddechowego oraz układu krążenia.

Unikalna eliptyczna regulacja segmentu oparcia leża umożliwi zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa podczas pozycjonowania oraz:

- Minimalizuje tarcie i siły ścinające.
- Zapobiega uciskowi w obrębie jamy brzusznej.
- Zapewnia optymalne ułożenie i wygodę.

Indywidualne dostosowanie wysokości, szerokości oraz długości łóżka **MMO8000** pozwala zapewnić komfort każdemu pacjentowi oraz umożliwić wczesną mobilizację.



NIEZAWODNOŚĆ

Łóżko spełnia wymogi normy ISO 60 601-2-52, a rama łóżka **MMO8000** objęta jest 10-cio letnią gwarancją.

W przypadku awarii lub przeglądów do Państwa dyspozycji są specjaliści autoryzowanego serwisu dystrybutora.



BEZPIECZEŃSTWO

Ultraniska pozycja łóżka **MMO8000** (21cm) pozwala zapewnić optymalne ustawienie wysokości dla bezpiecznego opuszczania łóżka przez pacjenta.

W najniższej pozycji łóżka, automatycznie aktywuje się hamulec centralny.

Funkcje elektryczne łóżka mogą zostać selektywnie zablokowane, dzięki temu pacjent może sterować tylko wybranymi funkcjami w zależności od jego stanu zdrowia.

Bezpieczne obciążenie robocze wynosi aż 340 kg, w tym 250 kg pacjent, a 90 kg pozostałe akcesoria.

SKUTECZNOŚĆ KLINICZNA

Łóżko **MMO8000** zostało zaprojektowane taki sposób, aby zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających pacjentów bariatrycznych.

Zaawansowane funkcje elektryczne łóżka, takie jak regulacja segmentu oparcia z funkcją eliptycznej autoregresji, elektryczna funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz szeroki zakres regulacji wysokości elektrycznej z możliwością zapamiętania pozycji wyjściowej, pozwalają zapobiegać zdarzeniom niepożądanym oraz ułatwiają wygodne pozycjonowanie oraz bezpieczną mobilizację pacjenta.

Praca z łóżkiem pozwala stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego, umożliwiając wdrożenie terapii skutecznych klinicznie i wspomagając procesy zapewniania najwyższej jakości i skuteczność opieki.



Elektryczna regulacja segmentu oparcia





Elektryczna funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga



Pamięć wysokości łóżka

Profilaktyka odleżyn i ucisku w obrębie jamy brzusznej

Elektryczna regulacja segmentu oparcia z funkcją eliptycznej autoregresji pozwala regulować kąt oparcia od 0° do 70° z ruchem w poziomie do **23 cm**. Dzięki czemu, umożliwia zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa podczas pozycjonowania, minimalizuje efekty działania tarcia i sił ścinających oraz zapobiega uciskowi w obrębie jamy brzusznej.

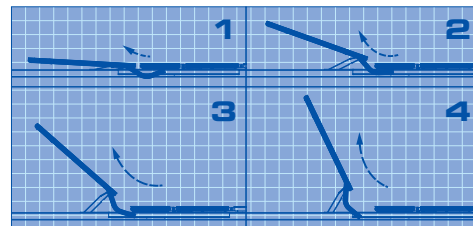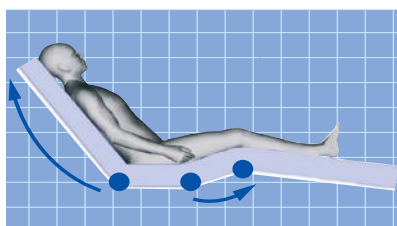

Zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą kontaktową

Łóżko **MMO8000** zostało skonstruowane tak, aby zapewnić łatwy dostęp do wszystkich jego powierzchni oraz umożliwić szybkie czyszczenie i dezynfekcję. Codzienna higiena powierzchni łóżka będących w najczęstszym kontakcie z rękoma opiekuna i/lub pacjenta pozwala zminimalizować ryzyko przenoszenia zakażeń szpitalnych drogą kontaktową.

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA


Dwa warianty do opieki krótko- i długoterminowej

Łóżko **MMO8000** oferowane jest z długimi barierkami bocznymi (¾ długości) z 4 poprzeczkami w stylisycie dostosowanej do krótkoterminowej opieki szpitalnej oraz z długimi drewnianymi barierkami bocznymi (pełna długość) do długoterminowej opieki domowej i w domach opieki.

Barierki boczne posiadają atest Krajowego Laboratorium Metrologii i Badań (LNE) i są zgodne z normą ISO 60 601-2-52.



ESTETYKA I MOBILNOŚĆ

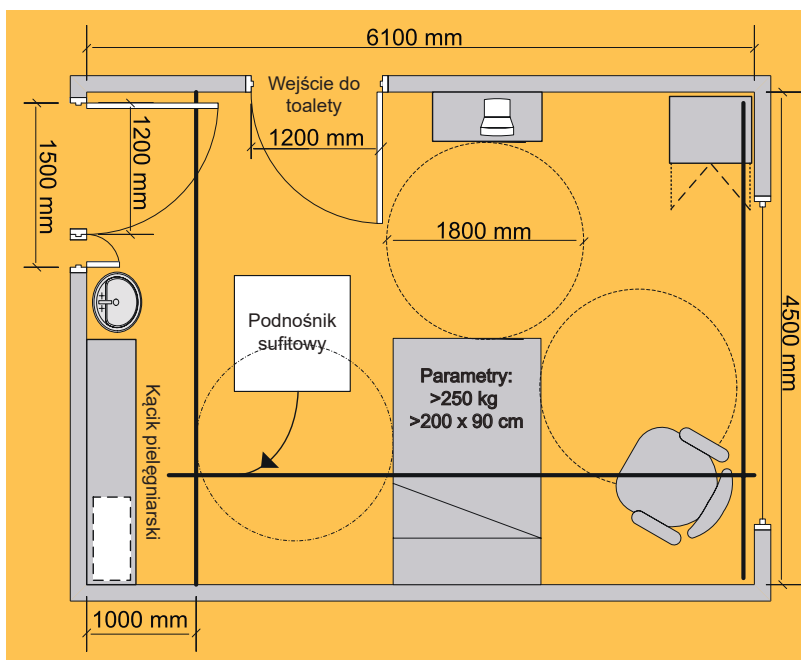


Pielęgnacja i leczenie pacjenta bariatrycznego stanowi wyzwanie dla całego zespołu terapeutycznego, wymaga nie tylko rzetelnej wiedzy i umiejętności, ale także odpowiedniego łóżka szpitalnego z odpowiednio dostosowanym wyposażeniem.

Łóżko **MMO8000** spełnia surowe wymagania stawiane sprzętom do opieki nad pacjentami bariatrycznymi:

- Wzmocniona rama łóżka o dopuszczalnym bezpiecznym obciążeniu roboczym 340 kg (przy obciążeniu matercem i akcesoriami dodatkowymi do 90 kg).
- Leże z 4 panelami HPL, o szerokości od 100 do 120 cm z możliwością przedłużenia.
- Materac dostosowany do znacznych obciążeń, o bezpiecznym obciążeniu roboczym do 250 kg.
- Kierunkowe koła, pomagające sterować łóżkiem podczas transportu.

Trzy warianty szerokości łóżka

Szczyt łóżka z metalową barierką dla wariantu do opieki krótkoterminowej

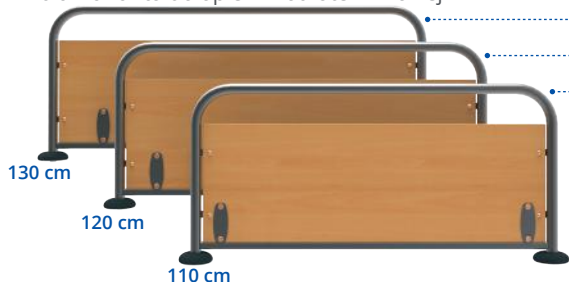

Szerokość leża:

- 120 cm
- 110 cm
- 100 cm



Szczyt łóżka z litego drewna dla wariantu do opieki długoterminowej



Bogaty wybór drewnianych aranżacji oraz kolorystyki szczytów łóżka pozwala dostosować łóżko **MMO8000** do potrzeb nawet najbardziej wymagających pacjentów.

Łóżko **MMO8000** oferuje możliwość doboru szerokości leża (100 cm, 110 cm, 120 cm), a także dodatkową możliwość przedłużenia leża aż o 18 cm, dla potrzeb dostosowania łóżka do indywidualnych potrzeb pacjenta i zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa.

Łóżko dostępne jest z dwoma rodzajami dolnego i górnego szczytu, w stylistyce odpowiadającej opiece krótko- (szczyt łóżka z metalową barierką) lub długoterminowej (szczyt łóżka z litego drewna).

Sterowanie i manewrowanie




Zestaw 8 kół podwójnych ułatwia sterowanie i manewrowanie łóżkiem **MMO8000**, nawet w ciasnym pokoju pacjenta. Ustawienie kół w pozycji sterowania, pozwala w sposób łatwy i bezpieczny sterować łóżkiem podczas transportu w wąskich korytarzach i na dużych odległościach również, gdy w łóżku przebywa pacjent.



Kierunkowe koła podwójne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Łóżka w wariantcie do szpitalnej opieki krótkoterminowej

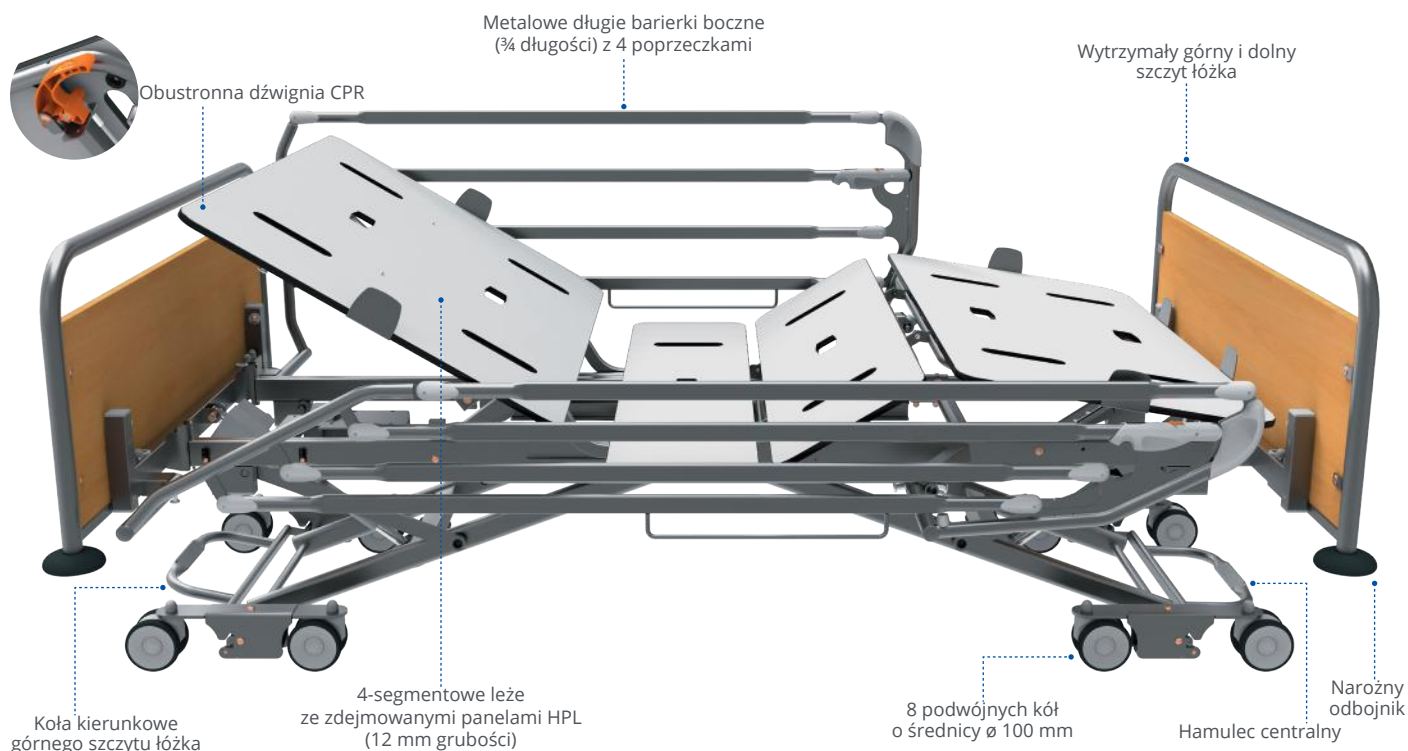

Materac dostosowany do znacznych obciążeń



Podstawowe funkcje i wyposażenie standardowe

- Bezpieczne obciążenie robocze: 340 kg
- Maksymalna waga pacjenta: 250 kg
- Wymiary łóżka: 110, 120, 130 cm x 214 cm
- Wymiary leża: 100, 110, 120 cm x 200 cm
- Elektryczna regulacja wysokości łóżka: minimalna - maksymalna 21cm - 83 cm
- Elektryczna regulacja segmentu oparcia z funkcją eliptycznej autoregresji: 70°, 23 cm
- Automatyczna przerwa pracy segmentu oparcia dla kątów: 30° i 45°
- Elektryczna regulacja segmentu ud: 30°
- Ręczna regulacja segmentu podudzia: 20°
- Elektryczna funkcja Trendelenburga: +/-14°
- Funkcja Autocontour
- Segmenty leża ze zdejmowanymi panelami HPL: x 4
- Manualna dźwignia CPR
- Elektryczna funkcja CPR - wypoziomowanie leża w ciągu zaledwie kilku sekund
- Automatyczna pozycja krzesła
- Pamięć wysokości łóżka
- Sygnał najniższej pozycji łóżka
- Zdejmowany górny i dolny szczyt łóżka
- Koła o średnicy 100 mm z centralnym hamulcem
- Odbojniki i uchwyty na akcesoria w dwóch narożnikach łóżka
- Uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta
- Przewodowy pilot dla pacjenta (5 funkcji) z możliwością mechanicznego zablokowania wybranych funkcji elektrycznych łóżka

Wyposażenie dodatkowe

- Przedłużenie leża: + 18 cm
- Półka na pościel: + 25 cm, 15 kg
- Boczne uchwyty na akcesoria: x2
- Oświetlenie nocne pod łóżkiem
- Odbiornik podczerwień do pilota bezprzewodowego na podczerwień
- Zasilanie akumulatorowe



Metalowe długie bariery boczne (¾ długości) z 4 poprzeczkami (materac do 25 cm grubości)



Piankowy ochraniacz na metalowe długie bariery boczne



Panel końcowy dolnego szczytu łóżka



Drewniane bariery boczne o pełnej długości



Piankowy ochraniacz na drewniane bariery boczne



Dodatkowa poprzeczka do drewnianych barier bocznych



Pojedynczy uchwyt do podnoszenia się pacjenta - z rączką



Pojedynczy uchwyt do podnoszenia się pacjenta - z regulowaną rączką



Podwójny uchwyt do podnoszenia się pacjenta - z regulowaną rączką



Pojedynczy regulowany uchwyt do podnoszenia się pacjenta - z regulowaną rączką



Teleskopowy statyw na płyny infuzyjne z 4 wieszakami



Teleskopowy statyw na płyny infuzyjne z 2 wieszakami



Zintegrowane 18 cm przedłużenie leża




Teleskopowy bufor ochrony



Uchwyt do pilota na podcierwień



Elastyczny uchwyt na pilot przewodowy dla pacjenta

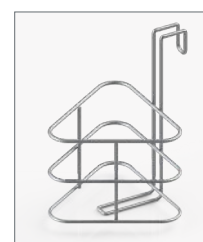

Uchwyt do worka na drenaż



Uchwyt na butelkę



Boczne uchwyty na akcesoria




Materac bariatryczny dostosowany do znacznych obciążeń, w wymiarach:
100x200x19cm (dla łóżek o szerokości 100 cm)
110x200x19cm (dla łóżek o szerokości 110 cm)
120x200x19cm (dla łóżek o szerokości 120 cm)



Pilot na podcierwień



Pilot przewodowy dla pacjenta

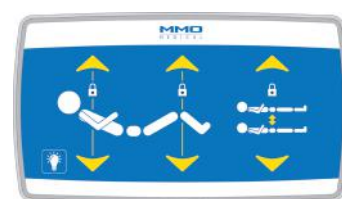

Sterownik satelita dla pacjenta



Sterownik dla opiekuna z blokadą centralną funkcji elektrycznych

105 LAT BLISKO KLIENTÓW

My wiemy jak sprostać wymaganiom



Pacjenta

- Godność
- Bezpieczeństwo
- Powrót do zdrowia
- Łatwość obsługi
- Komfort



Kierownictwa

- Zgodność ze standardami/normami
- Atrakcyjny stosunek ceny do jakości
- Kompleksowość rozwiązań
- Redukcja liczby wypadków przy pracy
- Gwarancja i serwis pogwarancyjny



Opiekunów i personelu medycznego

- Bezpieczeństwo
- Łatwość mycia i dezynfekcji
- Ergonomia pracy
- Łatwość i szybkość obsługi
- Skuteczność kliniczna



Autoryzowanych serwisów i serwisantów

- Szkolenia techniczne
- Niezawodność i długi okres gwarancji producenta
- Serwis pogwarancyjny
- Wsparcie techniczne producenta

MMO Medical, jako średniej wielkości przedsiębiorstwo ze 130 pracownikami, pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze swoimi klientami poprzez nasze zespoły sprzedaży, obsługi klienta i logistyki. Działamy szybko! Po to, by zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Francja: gwarancja jakości

Firma MMO Medical zlokalizowała swoją siedzibę we Francji (Bretania), gdzie zainwestowała w lokalną infrastrukturę dla potrzeb świadczenia usług projektowych i produkcyjnych na najwyższym poziomie. Firma posiada certyfikat świadczący o „Gwarantowanym pochodzeniu z Francji”. Oznacza to, że produkcja ponad 50% stosowanych surowców odbywa się w fabryce MMO Medical.

MMO Medical od wielu lat jest wierny najwyższym standardom jakości i odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska. Nasze procesy produkcyjne regularnie kontrolują certyfikowane urzędy oraz organy na podstawie norm ISO 9001.

MMO Medical dostarcza najwyższej jakości rozwiązania kliniczne do sektora medycznego, w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań pacjentów, opiekunów i personelu medycznego, kierownictwa szpitali i domów opieki oraz autoryzowanych serwisów i serwisantów.

MMO[®]
INTERNATIONAL

SIEDZIBA FIRMY, FABRYKA I DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
24 Route de Beauvais - BP 90148 - 35501 VITRÉ cedex - FRANCJA
Téléphone : +33 (0)2 99 75 04 50 - FAX : +33 (0)2 99 74 65 71
Email : info@mointernational.fr
www.mmointernational.fr

Ximedic
The art of medical technology

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
Ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice - POLSKA
Telefon: +48 531 251 435
Email: kontakt@xmedic.pl
www.xmedic.pl

Niektóre kolory w tym dokumencie mogą się zmieniać w zależności od stosowanej palety kolorów

